

BENUTZERHANDBUCH

Bariatrischer Toilettensstuhl

Produktcode: MAXIMUS




1. Eigenschaften

Der bariatrische Toilettensstuhl besteht aus einem pulverbeschichteten Stahlrahmen. Er hat höhenverstellbare Beine mit rutschfesten Gummikappen. Der Stuhl ist mit einem Toilettensitz und einem Toiletteneimer aus Kunststoff ausgestattet, die leicht zu montieren sind. Dank der Höhenverstellung kann er an die Bedürfnisse des Patienten angepasst werden. Armlehnen sorgen für Stabilität und Sicherheit.

Im Set enthalten: Hauptrahmen mit seitliche Armlehnen und Anti-Rutsch-Spitzen, Rückenrohr, Vorderrohr, Toilettensitz und Eimer mit Deckel.

Elemente des Toilettensuhls:

1. Hauptrahmen mit Seitenschiene
2. Rückenlehne Rohr
3. Armlehne
4. Vorderrohr
5. Toilette Eimer
6. Höhe Einstellung
7. Anti-Rutsch Tipp
8. Verbinden Punkte

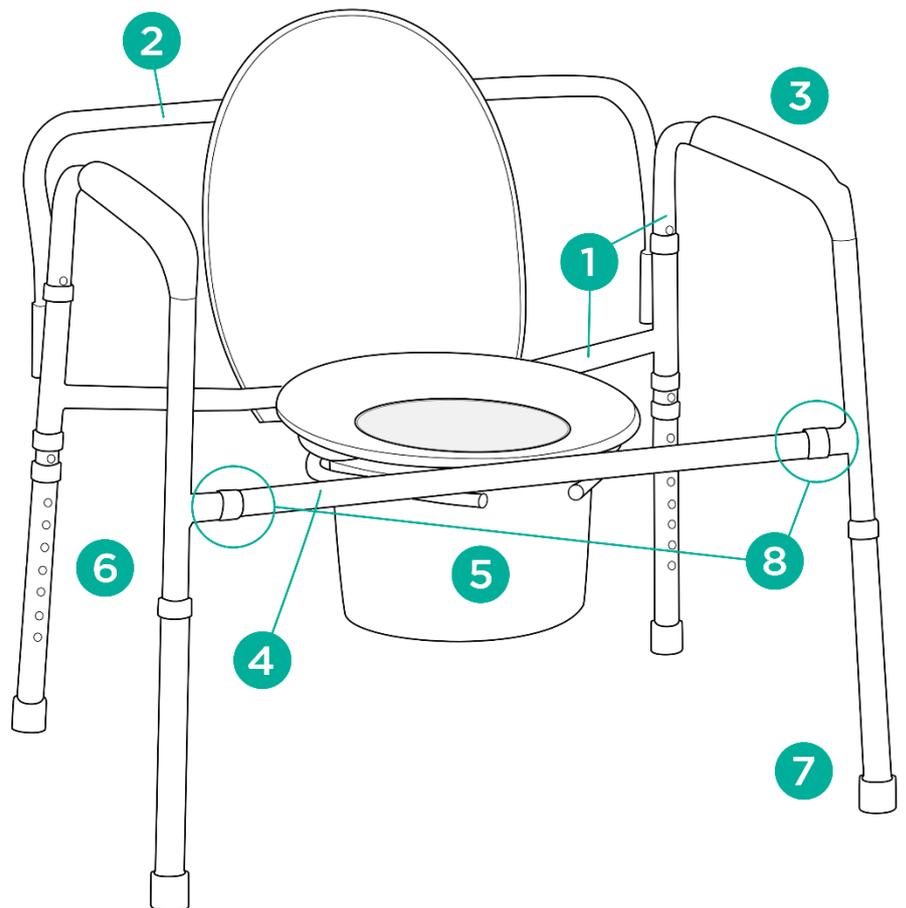

2. Anwendung

Der Toilettensstuhl ist ein Hilfsmittel, das dem Benutzer bei der Durchführung hygienischer Tätigkeiten hilft. Der Stuhl wird für Personen mit Funktionsstörungen und eingeschränkter Mobilität empfohlen, die Probleme beim Gehen ohne Hilfe haben, sowie für Personen, die nicht mehr in der Lage

sind, sich ohne Hilfe hinzusetzen und aufzustehen. Der Stuhl fungiert dank des unter dem Sitz angebrachten Toiletteneimers als Toilette. Der Stuhl erleichtert die Durchführung physiologischer Tätigkeiten und die Pflege des Benutzers.

3. Montage

Aufklappen und Zusammenklappen

Schritt 1. Seitenteile des Rahmens aufklappen. Achten Sie darauf, dass sich die Befestigungsöffnungen für das Rückenrohr auf der Rückseite befinden.

Schritt 2. Fixieren Sie das Vorderrohr in den Befestigungsöffnungen (Verbindungsstellen) an der Vorderseite der Seitenteile. Sichern Sie es mit einem Sicherungsstift.

Schritt 3. Befestigen Sie das Rückenrohr in den Öffnungen auf der Rückseite des Rahmens.

Schritt 4. Montieren Sie den Toilettensitz auf der unteren Schiene des Hauptrahmens, bis die Kunststoffgriffe einrasten.

Schritt 5. Heben Sie den Sitz an und montieren Sie den Toiletteneimer.

Höhenverstellung

- Um die Höhe des Stuhls einzustellen, drücken Sie den Metallstift, wählen Sie die entsprechende Beinhöhe aus und fixieren Sie dann die Position der Beine relativ zueinander mit dem Feststellstift. Die Beine sind in 2,5-cm-Schritten verstellbar.

Hinweis! Die Stifte müssen in jedem Bein auf gleicher Höhe angebracht sein. Die Beine müssen immer stabil auf dem Boden stehen.

4. Technische Daten

Gesamtbreite	77 cm
Innenweite	67 cm
Gesamttiefe	54 cm
Sitzhöhe vom Boden	42,5-58 cm
Gesamthöhe vom Boden	66-81,5 cm
Sitzmaße	42 x 35 cm
Stuhlgewicht	9,1 kg
Maximale Kapazität	294 kg

Rahmenfarbe	grau
-------------	------

5. Hinweise

Die Timago International Group übernimmt keine Verantwortung für den unsachgemäßen Gebrauch des Toilettenstuhls, die Nichteinhaltung von Sicherheitsvorschriften und den Missbrauch.

6. Wartung

Führen Sie regelmäßige Wartungen des technischen Zustands des Stuhls durch:

- Reinigen Sie den Toilettenstuhl regelmäßig ausschließlich mit Wasser und milden Reinigungsmitteln. Trocknen Sie ihn gründlich ab.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine starken Polier- und Reinigungsmittel, Scheuermittel, Bleichmittel, Benzin oder Lösungsmittel (dies kann zu Rahmenschäden, sichtbaren Mängeln und in der Folge zum Verlust des Garantieanspruchs führen).
- Toiletteneimer und Toilettensitz nach jeder Benutzung entleeren und desinfizieren. Toilettenreiniger nach Herstellerangaben verwenden.

7. Lager und Transportbedingungen

Das Gerät darf nicht direktem Sonnenlicht, Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

8. Garantieinformationen

Für alle von unserem Unternehmen vertriebenen Produkte gilt eine Garantie, deren Bedingungen in der Garantiekarte beschrieben sind, die auf unserer Website verfügbar ist. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Bitte beachten Sie, dass für Garantiezwecke der Kaufbeleg (Quittung oder Rechnung) aufbewahrt werden muss.

9. Etiketten

	Referenznummer		Hersteller
	LOT Nummer		Herstellung Datum
	Seriennummer		Medizinprodukt

	Notiz		Bitte Lesen Sie die Anleitung
	Der Hersteller überprüfte die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen an Medizinprodukte.		

Unser komplettes Produktsortiment ist bei unseren Vertriebspartnern erhältlich.
 Weitere Informationen finden Sie unter: **www.timago.com**.
 Danke, dass Sie sich für Timago entschieden haben!



Timago International Group
Ossowski spółka komandytowa
 ul. Karpacka 24/12
 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00
 F.: +48 33 499 50 11
 E.: info@timago.com

