



FortiGO

BRUGERVEJLEDNING

BRUGERVEJLEDNING

Elektrisk kørestol

Produktkode: FortiGO



1. Sikkerhedsoplysninger

- Læs vejledningen, før du bruger kørestolen.
- Brug ikke kørestolen, før den er foldet ud og samlet.
- Det anbefales ikke, at personer med handicap, der forhindrer dem i selv at bruge kørestolen, bruger den.
- Maksimal kapacitet må ikke overstige 150 kg.
- Kørestolen må kun bruges af én person ad gangen.
- Under kørsel anbefales det at holde fødderne på fodstøtterne og underarmene på armlænene.
- Kontroller batteriniveauet på kontrolpanelet før kørsel.
- Den elektriske kørestol må kun anvendes på flade overflader eller lave hældninger. Kør ikke på overflader med hældning over 6 grader.
- Kør ikke med maksimal hastighed op eller ned ad bakke.
- Kør ikke på bløde og glatte overflader som mudder, sand osv.
- Kør ikke sidelæns på stærkt skrånende overflader.
- Tilføj ikke ekstra belastning på kørestolen i form af f.eks. anhængere.
- Foretag ikke selv reparationer eller ændringer på kørestolens konstruktion. Brug kun originale reservedele fra producenten.
- Rejs dig ikke op eller sæt dig ikke ned i kørestolen, mens kontrolmodulet er tændt.
- Brug ikke kørestolen uden anti-tip-hjul.
- Gå ikke op i eller ud af kørestolen uden hjælp fra en anden person, når den manuelle tilstand er aktiveret.
- Læn dig ikke frem for at nå genstande foran, ved siden af eller bag kørestolen – det kan få kørestolen til at vælte.
- Stå ikke på fodstøtten – det kan få kørestolen til at vælte.
- Undgå pludselige retningsskift under kørsel på skråninger.
- Sænk hastigheden ved nedkørsel eller ved sving.
- Kontroller, at hjulene er korrekt monteret.
- Undgå pludselige bevægelser med joysticket. Brug i stedet jævne bevægelser.
- Opbevar kørestolen i overdækkede bygninger under regn.

- Kontrollér, at håndtagene på højre og venstre motor står i elektrisk tilstand, før kørestolen tændes.
- Undgå under alle omstændigheder steder med vandrette mellemrum (revner, sprækker).
- Fjern batteriet, hvis kørestolen ikke skal bruges i længere tid.
- Brug ikke kørestolen på veje – det kan medføre trafikulykker.
- Opbevar ikke kørestolen i omgivelser med høj temperatur og fugtighed.

2. Produktbeskrivelse og anvendelse

Elektriske kørestole er designet til personer med mobilitetsproblemer og hjælper handicappede brugere med daglige aktiviteter. Den kan erstatte en standard kørestol.

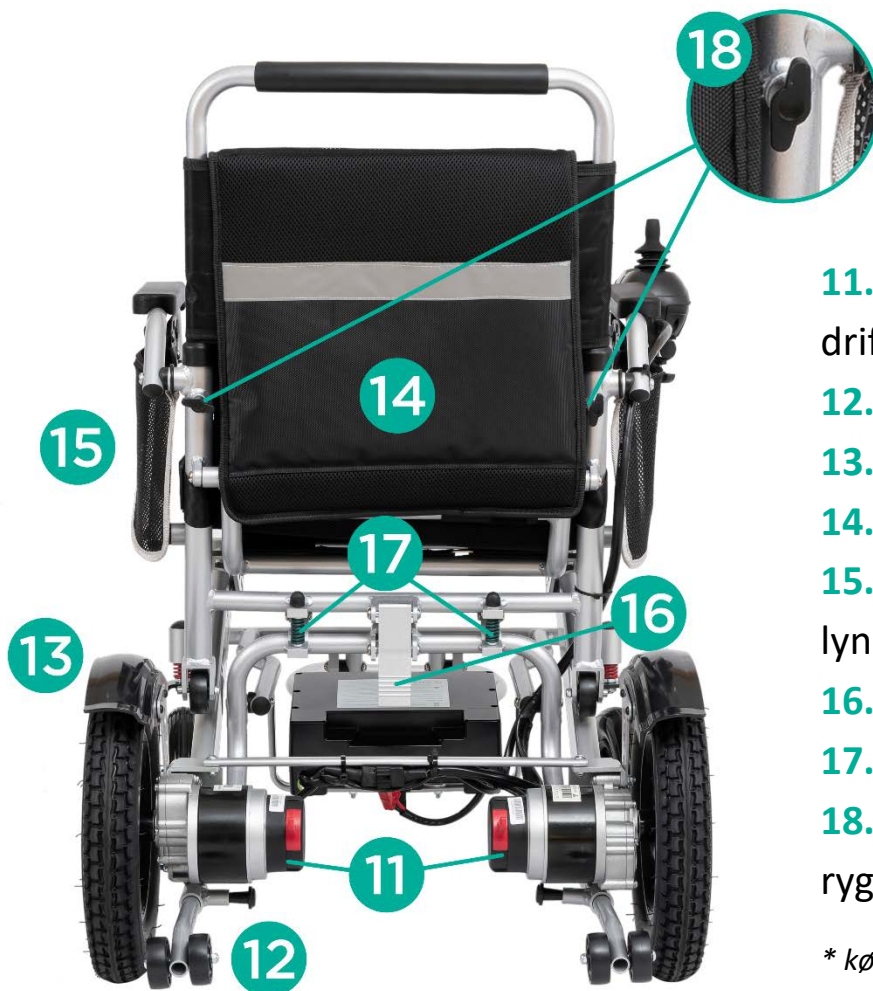
Den elektriske kørestol er egnet til patienter med:

- handicap, der har problemer med at bevæge sig uden hjælp.
- funktionsnedsættelse og begrænset bevægelighed.
- sygdomme i hjerte og kredsløbssystem.
- svækkelse af kroppen på grund af høj alder.

A. ELEMENTER I KØRESTOLEN



1. Skubbebøjle
2. Sæde med sikkerhedssele
3. Rygstøtte
4. Kontrolenhed
5. Oplyfteligt armlæn
6. Knap til opklapning af armlæn
7. Bagerste pneumatisk 12" hjul
8. Forreste massivt 8" hjul med støddæmper
9. Lithiumbatteri
10. Fodstøtte



11. Motor- og driftsfunktionshåndtag

12. Anti-tip-hjul

13. Stænkskærm

14. Lomme til ejendele

15. Små netlommer med lynlås

16. Sikkerhedsspænde

17. Støddæmpere *

18. Knopper til justering af ryglæn

** kørestolen har støddæmpere foran, bagpå og i midten*

B. PRODUKTEGENSKABER

- Aluminiumsstel, sammenklappeligt
- Brugervenligt kontrolmodul
- Sikker og pålidelig elektromagnetisk bremse
- Sikkerhedssele og anti-tip-hjul
- Højdejustering af ryglæn
- Fuldt lukket, vedligeholdelsesfrit batteri
- Lomme til småting placeret bag på ryglænet
- Små sidelommer med lynlås
- To driftsformer: elektrisk tilstand og manuel tilstand

C. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

1. Produkttype: til udendørs og indendørs brug
2. Maksimal hastighed: ≤ 6 [km/t]
3. Maksimal kapacitet: 150 [kg]
4. Bremselængde på vandret overflade (ved maks. hastighed): $\leq 1,5$ [m]
5. Rækkevidde: 20 [km]

6. Batteri: lithium 24[V] x 20 [Ah]
7. Maks. stigningsvinkel: $\leq 6^\circ$
8. Maks. drejeradius: 1 [m]
9. Kørestolens vægt: 26,50 kg
10. Batteriets vægt: 3,50 kg
11. Opladningstid for batteri: 6-8 timer

Bemærk! Visse parametre kan variere afhængigt af brugerens vægt, vejforhold og batteriforbrug.

- Sikkerhedsklassifikation: type B
- Indtrængningsbeskyttelse for motor: IP54
- Motorydelse: cirka 250[W] for højre og venstre motor
- Kørestolen må ikke anvendes i områder med brændbare gasser blandet med luft, ilt eller dinitrogenoxid.

3. Ikonbeskrivelser

Symbol	Betydning
	Sikkerhedsklassifikation type B
	Vigtigt! Læs vejledningen
IP54	Beskyttelse mod begrænset indtrængning af støv og vandstænk fra alle retninger.
	Skrøbelig
	Denne side op
	Beskyt mod fugt og væde

4. Montering og justering

- Udklapning: Tag den elektriske kørestol ud af kassen. Hold sæderammen med den ene hånd og ryglænsrammen med den anden, og spred dem fra hinanden, indtil kørestolen er helt udfoldet (karakteristisk 'klik'-lyd; sikkerhedsspændet skal låses). Træk fodstøtten ned.
- Sammenklapning: Tryk på sikkerhedsspændet bag på kørestolen (væk fra dig), og fold langsomt kørestolen sammen ved at bevæge ryglænet fremad. Fold fodstøtten op.

- Justering af kontrolmodulets position: Justering skal kun foretages, mens du sidder i kørestolen. Løsn monteringskruen, og flyt beslaget frem eller tilbage til passende længde. Stram derefter skruen.
- Ophældning af armlæn: Tryk på de røde knapper på ydersiden af kørestolen for at løfte armlænene. For at sænke armlænet, træk det ned, indtil du hører et 'klik'.
- Montering af anti-tip-hjul: Indsæt hjulene i monteringsåbningerne bag på kørestolen. Træk låseskruen, og skub hjulene ind, indtil du hører et klik.
- Fjernelse af batteri: For at fjerne batteriet skal du frakoble kablet og trykke på kontakten under batteriet. Fjern derefter batteriet. For at sætte det i igen, gentag trinnene.

5. Brugsbetingelser

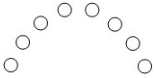
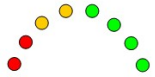
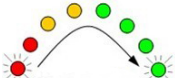
A. KONTROLMODULETS FUNKTIONER



1. Batteriniveauindikator
2. Tænd/sluk-knap
3. Horn
4. Hastighedsniveauindikator
5. Knapper til hastighedsjustering
6. Lydløs-knap
7. Advarselsknap
8. Joystick

- Joystick – bruges til at styre hastighed og retning (fremad, bagud og dreje). Kørselsretningen afhænger af den retning, joystick'et skubbes i. Jo længere joystick'et bevæges væk fra midten af kontrolpanelet, desto hurtigere kører kørestolen. Kørestolen nedsætter automatisk hastigheden, når joystick'et slippes. Undgå hurtige bevægelser med joystick'et under stop.

- Hastighedsindikatoren har 5 niveauer: 1 – langsomst, 5 – hurtigst.

LED display	Status	Betydning/Description
	Alle LED-lys er slukket	Kørestolen er slukket eller i dvaletilstand.
	Alle LED-lys er tændt	Kørestolen er tændt. Lysets farve indikerer batteriets opladningsniveau. Grøn – fuldt opladet, rød – afladet batteri.
	Blinkende rødt LED-lys	Lavt batteriniveau. Oplad batteriet hurtigst muligt.
	LED-lys tænder sekventielt fra venstre mod højre	Kørestolens batteri oplades. Når batteriet nærmer sig fuld opladning, falder blinkehastigheden. Alle grønne lys betyder, at batteriet er fuldt opladet.

B. SKIFT MELLEM MANUEL OG ELEKTRISK TILSTAND

For at bruge kørestolen i elektrisk tilstand skal du løfte venstre og højre motorhåndtag bag på kørestolen. For manuel tilstand skal håndtagene sænkes.



ELEKTRISK TILSTAND

MANUEL TILSTAND

C. OPLADER

- Sættet indeholder en oplader, der er beregnet til batteriet.
- Opladningstiden for batteriet er ca. 6-8 timer.
- Tilslut opladeren til opladningsporten i kontrolmodulet (fjern lygtemodulet før opladning) eller direkte til batteriet.

BEMÆRK: Sluk kontrolpanelet, før du tilslutter opladeren. Hvis opladeren tilsluttes direkte til batteriet, skal batterikablerne frakobles først.

- Rødt lys betyder, at batteriet oplades. Grønt lys betyder, at batteriet er fuldt opladet. Opladeren slukker automatisk efter endt opladning for at undgå overopladning.
- Tilslut opladeren til strømforsyningen.
- Kontroller forbindelsen.
- For at undgå brandfare må opladekredsløbet ikke ændres eller frakobles under opladning.
- For at kontrollere det aktuelle batteriniveau på kontrolmodulet, skal opladeren frakobles.

D. BRUGSANVISNING

- Vælg den ønskede køremodus.

Bemærk! Skift ikke tilstand under kørsel på hældninger.

- Tryk på tænd/sluk-knappen for at kontrollere, om bremsene fungerer korrekt. Bremsene virker korrekt (elektrisk tilstand), hvis kørestolen ikke kan skubbes. Kontakt ellers forhandleren.
- Vip fodstøtten op, og sæt dig komfortabelt på sædet. Sænk derefter fodstøtten tilbage til vandret position.

Bemærk! Brug ikke fodstøtten som støtte ved ind- eller udstigning. Dette kan få kørestolen til at tippe og vælte.

- Sæt dig i kørestolen, og tænd for kontrolpanelet. LCD-panelet vil lyse op. Joysticket skal være i neutral position.
- Vær forsigtig ved første brug. Kontrollér hastighed og retning omhyggeligt. Den elektromagnetiske bremse frigøres først, når joysticket skubbes (elektrisk tilstand). For at øge hastigheden – skub joysticket længere væk fra neutral position. For at nedsætte hastigheden – gør det modsatte.
- Slip joysticket for at standse kørestolen. Tryk på tænd/sluk-knappen for at stoppe kørestolen.
- Brug de dedikerede knapper på kontrolpanelet til at justere kørestolens hastighed efter brugerens fysiske tilstand og vejforhold.

- Kørestolen må kun bruges på flade overflader. Kørsel på mudrede eller ujævne underlag kan beskadige styresystemet.

6. Technical data

Produktkode	FortiGO
Samlet højde	97-102 cm
Samlet bredde	65 cm
Samlet længde	110 cm
Sædehøjde fra jorden	53 cm
Ryglænsenhøjde	57-62 cm
Sædepudedimensioner	49 x 46 x 6 cm
Batterivægt	3,50 kg
Maksimal kapacitet	150 kg
Kørestolens vægt	26,50 kg
Hjul	foran: massive, drejelige 8" bagtil: pneumatiske 12"

7. Rengøring og vedligeholdelse

- Det anbefales regelmæssigt at inspicere kørestolens konstruktion og dens elementer (hjul, rammer, kabler, kontrolmodul, bremses osv.).
- Det anbefales regelmæssigt at kontrollere dæktrykket i baghjulene.
- Brugte dele af kørestolen skal udskiftes (kontakt forhandleren for at gøre dette).

Vedligeholdelse og rengøring af batteriet:

1. Kontroller jævnligt batteriniveauet på kontrolpanelet. Hvis niveauet er lavt, skal batteriet oplades med det samme for at undgå spændingsfald, som kan forkorte batteriets levetid.
2. Batteriet er markeret med symboler for plus- og minuspoler, og opladekredsløbet er korrekt tilsluttet. Tilslut ikke opladekredsløbet selv.
3. Hvis kørestolen ikke skal bruges i en længere periode, skal batteriet oplades mindst én gang om måneden.

4. Batteriet har en begrænset levetid. Udskift det med et nyt, når det er udtjent.
5. Batteriet skal holdes rent og uden for børns rækkevidde. Undgå stød eller slag mod batteriet.
6. Regelmæssig opladning af batteriet forlænger dets levetid.
7. Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til lokale miljøbestemmelser.

8. Dækvedligeholdelse:

Det anbefales at pumpe dækkene op til maksimalt 2,5 bar (35 PSI). Trykket bør justeres i forhold til brugerens vægt og ændringer i lufttemperaturen. Dæk kan miste luft over længere tids opbevaring eller manglende brug. Kontroller jævnligt dæktrykket og dækkenes slid. Når slidbanemønsterets dybde er reduceret til 1 mm, skal dækkene udskiftes med nye. Følg disse instruktioner for at pumpe dækkene korrekt:

a. Let luftmangel

- Tryk dækket jævnt med hænderne, så dækket og fælgen passer korrekt sammen.
- Pump hjulet op til det ønskede tryk.

b. Intet lufttryk

- Pump hjulet op til cirka 30 % af dets samlede volumen, og tryk dækket jævnt med hænderne, så dækket og fælgen passer korrekt sammen.
- Pump derefter hjulet op til det ønskede tryk.

9. Opbevarings- og transportbetingelser

A. TRANSPORT

- Vær forsigtig under transport. Produktet må ikke kastes, vendes eller udsættes for tryk.
- Foldning af kørestolen: følg samlingsvejledningen i omvendt rækkefølge.

B. OPBEVARING

Kørestolen skal opbevares i et tørt og godt ventileret rum.

Undgå: høje temperaturer og hurtige temperaturændringer, syrer, baser og ætsende kemikalier.

C. VEJRBETINGELSER FOR OPBEVARING

Temperatur: -40[°C] ~ +55[°C]

Luftfugtighed: ≤80%

Lufttryk: 86 ~ 106 kPa

10. Fejlafhjælpning af kørestolen

Ved funktionsfejl aktiveres en alarm med lydssignal (medmindre lyden er slået fra), og en diagnostisk diode blinker. Antallet af bip og blink angiver typen af fejl.

Kontrolenhed	Problem	Mulig løsning
	Batteriniveauindikatoren lyser, og kontrolenheden afgiver syv biplyde	1. Joysticket er ikke i neutral position. 2. Bekræft først, om joysticket er tilsluttet. 3. Afbryd strømforsyningen fra kontrolenheden. Tilslut den igen, og kontroller, om kontrolenheden fungerer normalt. 4. Hvis problemet ikke er løst, kontakt forhandlerens serviceafdeling.
	Batteriniveauindikatoren lyser, og kontrolenheden afgiver to biplyde	1. Løs forbindelse til venstre motorkabel. 2. Tjek, om venstre motorkabel er i god stand, ikke løst, afkoblet eller frakoblet. 3. Byt venstre og højre motorkabel. Efter ombytningen vil en alarm lyde 4 gange, hvis der er en fejl i venstre motor / 2 gange, hvis der er en fejl i kontrolenheden. Kontakt forhandlerens serviceafdeling.
	Batteriniveauindikatoren lyser, og kontrolenheden afgiver tre biplyde	1. Løs forbindelse til venstre bremse.

		2. Tjek, om venstre bremsehåndtag står i elektrisk tilstand. 3. Tjek, om bremsen er i god stand, ikke løs, afkoblet eller frakoblet. 4. Byt venstre og højre motorkabel. Efter ombytning vil alarmen lyde 5 gange ved fejl i venstre bremse / 3 gange ved fejl i kontrolenheden. Kontakt forhandlerens serviceafdeling.
	Batteriniveau- og hastighedsniveauindikatoren lyser, og kontrolenheden afgiver tre biplyde.	1. Fejl i bremsekonfiguration 2. Tjek, om både venstre og højre bremsehåndtag står i elektrisk tilstand 3. Kontakt forhandlerens serviceafdeling
	Batteriniveauindikatoren lyser, og kontrolenheden afgiver fire biplyde	1. Løs forbindelse til højre motorkabel. 2. Tjek, om højre motorkabel er i god stand, ikke løst, afkoblet eller frakoblet. 3. Byt venstre og højre motorkabel. Efter ombytning vil alarmen lyde 4 gange ved fejl i venstre motor / 2 gange ved fejl i kontrolenheden. Kontakt forhandlerens serviceafdeling.

	Batteriniveauindikatoren lyser, og kontrolenheden afgiver fem biplyde	1. Løs forbindelse til højre bremse. 2. Tjek, om højre bremsehåndtag står i elektrisk tilstand. 3. Tjek, om bremsen er i god stand, ikke løs, afkoblet eller frakoblet. 4. Byt venstre og højre motorkabel. Efter ombytning vil alarmen lyde 5 gange ved fejl i venstre bremse / 3 gange ved fejl i kontrolenheden. Kontakt forhandlerens serviceafdeling.
	Batteriniveauindikatoren lyser, og kontrolenheden afgiver syv biplyde	Kontakt forhandlerens serviceafdeling.
	Batteriniveauindikatoren lyser konstant med rødt lys.	1. Batterispændingsproblem 2. Batteriet skal oplades med det samme. 3. Kontrolenhedsfejl. Kontakt forhandlerens serviceafdeling.

11. Garantioplysninger

- Alle produkter, der distribueres af vores virksomhed, er omfattet af en garanti, hvis betingelser er beskrevet i garantikortet, som findes på vores hjemmeside. Kontakt venligst den forhandler, hvor du har købt produktet. Bemærk venligst, at købsbevis (kvittering eller faktura) skal opbevares med henblik på garantien. Som en brugervenlig virksomhed tilbyder vi kun testede produkter med hensyn til materiale, kvalitet og funktionalitet. Hvis du har spørgsmål vedrørende serviceprocedurer, er du velkommen til at kontakte os.
- Garantien dækker ikke:

- sliddel: polstring, dæk, armlæn, batteri
- skader som følge af: selvudførte reparationer, ændringer i produktets konstruktion, fald, transport, forkert brug, manglende overholdelse af brugsanvisningen, naturkatastrofer (ild, jordskælv, oversvømmelser)
- Produktkoden findes på kørestolens ramme.



Zhejiang Hand In Hand Intelligent Health Technology Co., Ltd.
2nd Floor, No. 12, Xiayantou Nature Country, Jiuzhou Town, East
City Street, Yongkang, Jinhua, Zhejiang, China



SUNGO Cert GmbH
Harffstr. 47, 40591, Düsseldorf, Germany



Timago International Group
Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland
T.: +48 33 499 50 00
E.: info@timago.com



07/2025 (I)