

# BENUTZERHANDBUCH

## Rollstuhl mit Transportfunktion

### Produktcode: MOBIL-TIM



## 1. Eigenschaften

Der Rollstuhl besteht aus einem Stahlrahmen. Er verfügt über hochklappbare Armlehnen, die Menschen mit eingeschränkter Mobilität das Ein- und Aussteigen erleichtern. Er ist mit 8-Zoll-Hinterrädern und 6-Zoll-Vorderrädern, manuell gesteuerten Bremsen (Hinterräder), einem Sitz mit Rückenlehne, Sicherheitsgurt und Fußstütze ausgestattet.

## Elemente des Rollstuhls:



- 1 Armlehne
- 2 Handbremsen
- 3 Sicherheit Gürtel
- 4 Rückenlehne
- 5 Sitz
- 6 Fußstütze
- 7 Hintere Räder 8"
- 8 Vorderräder 6"
- 9 Sicherheit Schnalle

## Rollstuhl nach Falten:



## **2. Anwendung**

Rollstühle sind für Menschen konzipiert, die Probleme mit der Fortbewegung ohne Hilfe haben, sowie für Patienten mit Funktionsstörungen und eingeschränkter Mobilität. Der Rollstuhl ist nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet. Der Rollstuhl darf nur mit Hilfe einer Begleitperson verwendet werden. Der Rollstuhl dient als Transportstuhl. Er erleichtert die Fortbewegung im Alltag. Der Rollstuhl wird insbesondere für Menschen empfohlen, die Mobilitätsprobleme haben, die folgende Ursachen haben: Lähmung, Fettleibigkeit oder krankhaftes Untergewicht, Degeneration oder Deformierung von Gliedmaßen, Degeneration oder Gelenkverletzungen, Gliedmaßenverletzungen oder Amputationen, Herz- und Kreislauferkrankungen und Durchblutungsstörungen.

## **3. Montage**


### **Aufklappen/Zusammenklappen des Rollstuhls:**

- Halten Sie den Sitzrahmen mit einer Hand und den Rückenlehnenrahmen mit der anderen fest und spreizen Sie sie auseinander, bis sie vollständig ausgeklappt sind. Schließen Sie den Sicherheitsgurt hinter dem Rücksitz. Ziehen Sie die Armlehnen und die Fußstütze nach unten.
- Um den Rollstuhl zusammenzuklappen, wiederholen Sie die Schritte, beginnend mit dem Einklappen der Armlehnen und der Fußstütze, entriegeln Sie dann den Sicherheitsgurt und halten Sie Rückenlehne und Sitzrahmen fest, indem Sie sie auseinanderziehen, bis sie ganz zusammengeklappt sind.


### **KLAPPFUNKTION DER ARMLEHNEN:**

- Ziehen Sie die Armlehne mit einer leichten Bewegung nach oben.
- Benutzen Sie die Armlehne nicht als Stütze beim Aufstehen. Wenn Sie Hilfe benötigen, bitten Sie um Hilfe.

## BREMSEN

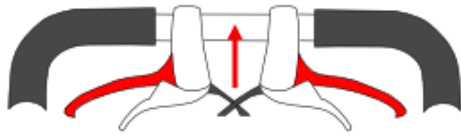

**Bild 1**

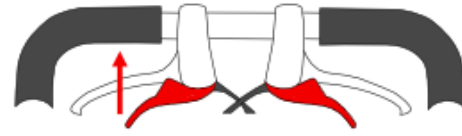

**Bild 2**

- Um die Räder zu blockieren, ziehen Sie die oberen Handbremsen an (Abbildung 1).
- Um die Räder zu entriegeln, betätigen Sie die untere Handbremse (Bild 2).
- Zum Anhalten leicht die oberen Handbremsen betätigen.

## FUSSSTÜTZEN

- Benutzen Sie die Fußplatten beim Ein- und Aussteigen aus dem Rollstuhl nicht als Stütze, da Sturzgefahr besteht.

## UMSTEIGEN IN DEN ROLLSTUHL

- Beim Ein- und Aussteigen aus dem Rollstuhl, bei der Änderung der Position des Benutzers und beim Aussteigen ist das Feststellen der Bremsen unbedingt erforderlich.
- Beim Platzwechsel sollte sich der Rollstuhl so nah wie möglich am Transferort befinden. Der Rollstuhl sollte das Bett oder einen anderen genutzten Sitz berühren. Wenn der Benutzer seinen Sitz nicht selbständig wechseln kann, setzen Sie ihn in den Rollstuhl um.
- Um eine Instabilität des Rollstuhls zu vermeiden, sollte der Benutzer möglichst tief in der Mitte des Sitzes sitzen.

## 4. Technische Details

Gesamt Breite	51 cm
Innenweite	41 cm
Gesamt Tiefe	80 cm
Sitzhöhe vom Boden	48 cm

Gesamt Höhe	91 cm
Sitzmaße	41 x 41 cm
Gewicht	9,5 kg
Maximale Kapazität	136 kg
Rahmen Farbe	Weiß

## 5. Hinweise

**Die Timago International Group übernimmt keine Verantwortung für den unsachgemäßen Gebrauch des Rollstuhls und die Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften.**

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch des Rollstuhls die Funktionsfähigkeit der Bremsen, die Konstruktion und den Zustand der Räder. Verwenden Sie den Rollstuhl nicht, wenn Mängel oder Defekte festgestellt werden.
- Der Rollstuhl verfügt nicht über eine Breitenverstellung. Stellen Sie sicher, dass die Breite des Rollstuhls für den Benutzer geeignet ist.
- Der Rollstuhl ist nur für das Zurücklegen kurzer Strecken im Innenbereich ausgelegt.

## 6. Reinigung und Wartung

Führen Sie regelmäßig die Wartung der Rollstuhlkomponenten durch:

- Der Sitz kann mit einem feuchten Tuch und kaltem oder warmem Wasser ohne Verwendung von Reinigungsmitteln gereinigt werden. Hartnäckige Flecken können mit einem Schwamm entfernt werden.
- Kunststoffelemente sollten mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.










## 7. Lager- und Transportbedingungen

Das Gerät darf nicht direktem Sonnenlicht, Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

## 8. Garantieinformationen

Für alle von unserem Unternehmen vertriebenen Produkte gilt eine Garantie, deren Bedingungen in der Garantiekarte beschrieben sind, die auf unserer Website verfügbar ist. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Bitte beachten Sie, dass für Garantiezwecke der Kaufbeleg (Quittung oder Rechnung) aufbewahrt werden muss.

## 9. Etiketten

	Referenznummer		Hersteller
	LOT- Nummer		Herstellung Datum
	Seriennummer		Medizinprodukt
	Notiz		Bitte Lesen Sie die Anleitung
	Der Hersteller überprüfte die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen an Medizinprodukte.		

Unser komplettes Produktsortiment ist bei unseren Vertriebspartnern erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie unter: **[www.timago.com](http://www.timago.com)**.

Danke, dass Sie sich für Timago entschieden haben!





## **Timago International Group**

Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: [info@timago.com](mailto:info@timago.com)



11/2024 (II)