

# GEBRAUCHSANWEISUNG

## Nachttisch

Produktcode: TableTIM




### 1. Eigenschaften

Der Nachttisch hat die Form eines C-förmigen Metallrahmens. Er verfügt über eine verstellbare Platte, auf der Gegenstände platziert werden können, und Rollen mit Bremse, um Mobilität und Bewegung über dem Bett zu gewährleisten.

### Unterstützende Komponenten:

Rahmen

- b. Basis mit Rädern (2 Sätze)
- c. Tischplattenrahmen
- d. Tischlaube
- e. Montage Schmetterling
- f. Befestigungsbutterfly mit Schraube
- g. Buchse
- h. Schraube mit Unterlegscheibe (2 Sätze)
- i. Tischplatte

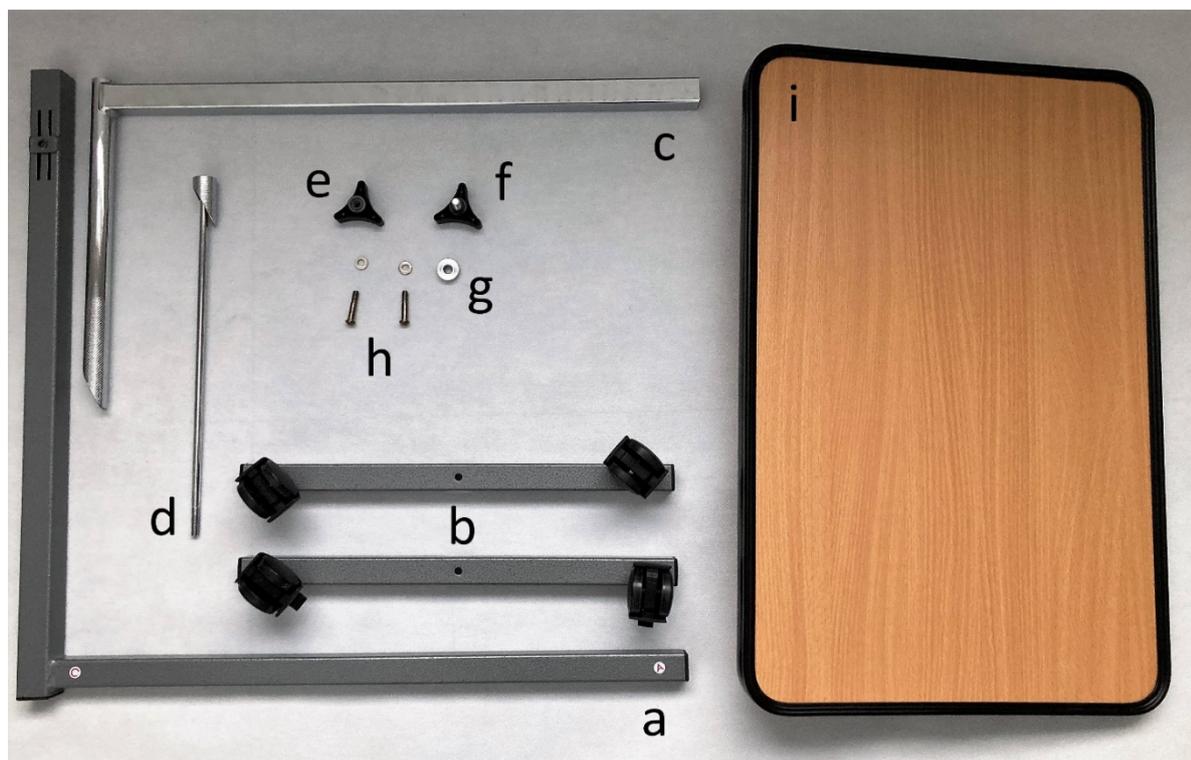

## 2. Anwendung

Der Nachttisch ist für den Einsatz direkt über dem Bett eines Patienten konzipiert und bietet eine Oberfläche zum Essen, Lesen oder Schreiben im Bett. Das Produkt ist sowohl für die Verwendung während der Pflege in medizinischen Einrichtungen als auch zu Hause konzipiert.

## 3. Montage und Einstellung

- an den Rahmen (a) schrauben Sie die beiden Untergestelle mit Rädern (b) - denken Sie daran, die Buchstabenmarkierungen richtig anzuordnen - den Buchstaben "A" vom Rahmen an den Buchstaben "A" des Untergestells mit Rädern, ebenso für die Buchstaben "B" / "C" / "D",
- Nach dem Drehen des Sockels stellen Sie ihn auf 4 Räder und stellen Sie die Radbremsen für die weitere Montage fest.
- in die quadratische Öffnung des Rahmens (a) den Rahmen der Oberseite (c) einsetzen,
- in die abgeschrägte Öffnung des Tischplattenrahmens (c) den Tischplattenstift (d) so einführen, dass sich die beiden abgeschrägten Flächen überlappen,
- in die kreisrunde Bohrung des Tischplattenrahmens (c) die Hülse (g) auf das hervorstehende Gewinde so einführen, dass der zuvor eingesteckte Tischplattendorn (d) dabei nicht verschoben wird,
- auf das hervorstehende Gewinde der Tischplattenwelle (d) schrauben Sie den Befestigungsflügel (e) - ziehen Sie den Flügel nicht zu fest an - ziehen Sie ihn nur so fest an, dass er nicht herausfällt,
- Legen Sie die Tischplatte ( i ) auf den vorbereiteten Tischplattenrahmen. Um die Installation der Arbeitsplatte zu erleichtern, fassen Sie sie mit einer Hand am Rohr an der Unterseite der Arbeitsplatte. Ziehen Sie nach dem Aufbringen der Arbeitsplatte den Befestigungsbügel (e) fest.
- Fixieren Sie den Befestigungs-Butterfly mit der Schraube (f) im Rahmenloch (a) und ziehen Sie ihn fest.

## Neigung der Tischplatte einstellen

- Um den Winkel der Tischplatte einzustellen, lösen Sie den Befestigungsschmetterling (e) an der Seite der Tischplatte.
- Nachdem Sie den richtigen Winkel eingestellt haben, ziehen Sie die Befestigungsschraube (e) fest.

## Höhe der Tischplatte einstellen

- Um die Höhe der Tischplatte einzustellen, lösen Sie den Befestigungsflügel mit der Schraube (f) am Grundrahmen (a).
- Nach dem Einstellen der richtigen Höhe den Befestigungsbügel mit der Schraube (f) festziehen.

## Bremsen

- Feststellen der Radbremsen für die Dauer der Nutzung des Tisches

## 4. Technische Daten

Abmessungen ( Länge x Breite )	60,5 cm x 40,2 cm
Tischplatte Maße	60 x 40 cm
Winkelverstellung der Tischplatte	0° - 90°
Höhe Einstellung	72 – 112 cm
Gewicht	6,7 kg
Max. Kapazität	10 kg
Räder Durchmesser	1,50''

## 5. Hinweise

**Die Timago International Group übernimmt keine Verantwortung für den unsachgemäßen Gebrauch des Rollstuhls, die Nichteinhaltung von Sicherheitsvorschriften und den Missbrauch.**

## 6. Reinigung und Wartung

Führen Sie regelmäßig die Wartung der Rollstuhlkomponenten durch:

- Die Polsterung und das Kissen können mit einem feuchten (nicht nassen) Tuch und kaltem oder warmem Wasser ohne Verwendung von Reinigungsmitteln gereinigt werden. Hartnäckige Flecken können mit einem Schwamm entfernt werden. Die Polsterung nicht zu stark einweichen. Von Wärmequellen fernhalten und trocknen.
- Kunststoffelemente sollten mit einem feuchten Tuch und ggf. unter Verwendung geeigneter Reinigungsmittel für Kunststoffelemente gereinigt werden. Befolgen Sie in diesem Fall die Anweisungen des Herstellers und die Sicherheitsmaßnahmen.

## 7. Lager- und Transportbedingungen

Das Gerät darf nicht direktem Sonnenlicht, Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

## 8. Garantieinformationen

Für alle von unserem Unternehmen vertriebenen Produkte gilt eine Garantie, deren Bedingungen in der Garantiekarte beschrieben sind, die auf unserer Website verfügbar ist. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Bitte beachten Sie, dass für Garantiezwecke der Kaufbeleg (Quittung oder Rechnung) aufbewahrt werden muss.

## 9. Etiketten

	Referenznummer		Hersteller
	LOT- Nummer		Herstellung Datum
	Seriennummer		Medizinprodukt

	Notiz		Bitte Lesen Sie die Anleitung
	Der Hersteller überprüfte die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen an Medizinprodukte.		

Unser komplettes Produktsortiment ist bei unseren Vertriebspartnern erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie unter: **[www.timago.com](http://www.timago.com)**.

Danke, dass Sie sich für Timago entschieden haben!







**Timago International Group**

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: [info@timago.com](mailto:info@timago.com)



01/2025(I)