



ULTRA-TIM

BRUGSANVISNING

1. Generelle oplysninger og sikkerhedsoplysninger

- Læs manualen inden første brug.
- Brug ikke scooteren, før den er samlet.
- Det anbefales ikke, at personer, der ikke er i stand til at betjene scooteren selvstændigt, bruger den.
- Den maksimale belastning må ikke overstige 120 kg.
- Scooteren må kun bruges af én person ad gangen.
- Det anbefales at holde fødderne på fodstøtten under kørsel.
- Kontroller altid batteriniveauet på kontrolpanelet før brug.
- Denne scooter må kun bruges på en flad overflade eller i lave højder. Den må ikke køres på en overflade med en hældning på mere end 9 grader.
- Kør ikke på scooteren med maksimal hastighed, når du kører op ad bakke eller ned ad bakke.
- Kør ikke på scooteren på bløde og glatte overflader såsom mudder, sand osv.
- Kør ikke på scooteren sidelæns på meget forhøjede områder.
- Sæt ikke ekstra belastning, såsom en trailer osv., på scooteren.
- Reparer eller modificer ikke selv scooterens konstruktion. Brug kun originale reservedele fra producenten.
- Stå ikke op eller sæt dig ned på scooteren, når kontrolmodulet er tændt.
- Brug ikke scooteren uden anti-tip-hjul.
- Læn dig ikke fremad for at gribe genstande, der ligger foran, på siden eller bag scooteren. Stå ikke på fodstøtten. Det kan medføre, at scooteren vælter.
- Undgå hurtige retningsskift, når du kører på forhøjninger.
- Sænk altid farten, når du kører ned ad bakke eller drejer.
- Kontroller inden brug, at hjulene er monteret korrekt.
- Udfør ikke pludselige bevægelser, mens du bruger styret.
- Når du opbevarer scooteren, skal du beskytte den mod regn og ugunstige vejrforhold.
- Før du tænder for scooteren, skal du sikre dig, at håndtaget er indstillet til elektrisk tilstand, og at batteriet er tændt.
- Undgå områder med vandrette mellemrum.
- Hvis scooteren ikke skal bruges i længere tid, skal du fjerne batteriet.
- Brug ikke scooteren på vejen. Det kan medføre en trafikulykke.

- Opbevar ikke scooteren på steder med høje temperaturer og høj luftfugtighed.

2. Produktbeskrivelse og anvendelse

Den elektriske mobilitetsscooter er designet til at hjælpe personer med nedsat mobilitet med at bevæge sig uafhængigt i hverdagen. Den anbefales til brugere, der har problemer med mobilitet som følge af sygdom, skade, handicap eller aldersrelaterede tilstande.

Scooteren er beregnet til individuel transport udendørs og indendørs på flade og moderat ujævne overflader, såsom i hjemmet, plejefaciliteter, rehabiliteringscentre og gågader. Scooteren hjælper brugeren med at udføre daglige aktiviteter og giver større uafhængighed i hverdagen.

Den elektriske mobilitetsscooter er velegnet til patienter med:

- handicap, som har problemer med at bevæge sig uden hjælp,
- dysfunktioner og nedsat bevægelighed,
- hjerte- og kardiovaskulære sygdomme,
- svækket krop på grund af høj alder.

2. Sikkerhedsinstruktioner

A. Hændelser med medicinsk udstyr


Enhver alvorlig hændelse, der involverer medicinsk udstyr, skal indberettes til producenten og til den kompetente myndighed i det EU-land, hvor brugeren eller patienten er bosiddende.

B. Sikkerhedssymboler

SYMBOL	BETYDNING
	Sikkerhedsklassificering type B
	Advarsel! Angiver en potentielt farlig tilstand/situation.
	Forbudt! Udførelse af en forbudt handling kan forårsage personskade og/eller beskadigelse af udstyret. Skader forårsaget af forbudte handlinger er ikke dækket af garantien.

	Obligatorisk! Disse handlinger skal udføres før brug. Hvis brugeren undlader at udføre de obligatoriske handlinger, kan det medføre personskeade og/eller beskadigelse af udstyret.
IPX4	Beskyttelse mod vandstænk fra alle retninger
	Læs brugsanvisningen, før du tager produktet i brug.
	Vær opmærksom på fodgængere
	Fjern IKKE dele eller advarselsmærkater fra scooteren.
	Stik IKKE fingre eller lemmer under afdækninger eller mellem bevægelige dele. Det kan medføre personskeader
	Overbelast ikke scooteren. Scooterens maksimale kapacitet må ikke overstige 120 kg
	Brug IKKE scooteren på trapper
	Brug ikke scooteren under ekstreme vejrforhold, såsom kraftig regn, ekstrem fugtighed, isdannelse osv. Brug ikke scooteren ved temperaturer under -20 °C eller over +40 °C
	Advarsel! Scooterens overfladetemperatur kan være høj.
	Brug kun autoriseret importørservice til reparation i tilfælde af uheld og/eller skader på delene.
	Batteriet indeholder ætsende stoffer. Bortskaf det i henhold til de lokale miljøbestemmelser.

	Før kørsel skal du sikre dig, at ryglænet er i opret position
	Brug kun vedligeholdelsesfrie, forseglede lithiumbatterier fra producenten
	Kør forsigtigt Tilpas hastigheden efter vejforholdene Sænk hastigheden, når du drejer
	Scooteren må IKKE køres på overflader, der er højere end den anbefalede sikre hældning ($\leq 9^\circ$)
	Brug scooterens lygte, når du kører om natten eller når sigtbarheden er nedsat
	Vær opmærksom på høje temperaturer på elektriske dele på scooteren Kontroller temperaturen, før du rører ved dem (batteri, controller, elektromagnetiske bremses, motorer)
	Brug ikke elektroniske enheder såsom mobiltelefoner, walkie-talkies, bærbare computere eller andre radiosendere, mens du kører
	Fjernelse af jordstikket kan medføre elektrisk fare. Hvis det er nødvendigt at bruge en stikkontakt med tre ben, skal du sikre dig, at der er installeret en godkendt adapter med to ben.
	Brug IKKE forlængerledninger med AC/DC-omformeren eller batteriopladeren
	Hold værktøj og andre metalgenstande væk fra batteripolerne. Kontakt med metalgenstande kan forårsage elektrisk stød
	Der er eksplosive forhold

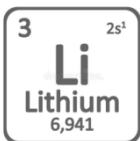	Bortskaffelse og genbrug For mere information, se afsnittet "Opbevarings- og transportbetingelser".
	
	Brug sikkerhedsbriller
	Indeholder lithiumkoltoksid
	Batteriopladeren er kun til indendørs brug
	Brandfarlige materialer Må ikke udsættes for åben ild
	MR Usikkert
	Konsulter fagfolk inden brug af scooteren i tilfælde af mentale eller fysiske handicap
	Hold korrekt position under kørsel
	Bevar koncentrationen under kørsel og undgå distraktioner



Skørt



Beskyt mod fugt og fugtighed

C. GENEREL INFORMATION



Brug ikke scooteren uden først at have læst og forstået brugsanvisningen. Brugsanvisningen giver brugeren de nødvendige oplysninger om sikkerhedsbestemmelser, vedligeholdelse og betjening af køretøjet.



Du må IKKE selv modificere, tilføje, fjerne eller afmontere nogen af scooterens dele eller deaktivere funktioner. Kontakt en autoriseret importør for reparationer.



Løft IKKE scooteren ved at tage fat i nogen af dens aftagelige dele, såsom armlæn, sæde eller betræk.

Sikkerhedstjek før kørsel

Hver gang før du bruger scooteren, skal du foretage en inspektion af de sliddele, såsom bremses, hjul osv.

Vægtbegrænsninger



Overskrid IKKE scooterens vægtpacitet (120 kg), da det kan medføre skader, der ikke er dækket af garantien.

Medbring IKKE andre passagerer på scooteren, da det kan medføre ustabilitet og/eller ulykker.

Kørsel på skråninger



Når du kører på en skråning, må du IKKE skifte scooteren til manuel tilstand, mens du sidder på den.

Kør IKKE scooteren på tværs af en hældning eller diagonalt op eller ned ad en hældning.

Kør IKKE op eller ned ad en potentielt farlig hældning (f.eks. områder dækket af sne, is, afklippet græs eller våde blade).

Det anbefales at læne sig let fremad, når du kører på en skråning, for at øge scooterens stabilitet (figur 1).



Figur1 . Kørestilling på skråninger

Kørsel på forskellige overflader

Scooterens konstruktion gør det muligt at køre på forskellige typer udendørs overflader (beton, asfalt, græs, jord, grus osv.). Det er dog vigtigt at huske på nogle få regler for at undgå unødvendig risiko for at beskadige scooteren:

- Sænk hastigheden, når du kører på ujævne overflader.
- Undgå højt græs eller løst grus eller sand.
- Kør IKKE på glatte overflader såsom is, da det kan medføre ulykker.
- Kør IKKE på ustabile overflader.
- Undgå huller og grøfter.
- Kør ikke på offentlige veje, da det kan medføre trafikulykker. Kør kun på fortove eller særlige cykelstier.

Kørsel på kantsten



Kør **IKKE** på kantsten, der er højere end 4 cm.

Kør **IKKE** baglæns på kantsten.

Trapper og rulletrapper

Scooteren er ikke designet til at køre op eller ned ad trapper eller rulletrapper. Den kan transporteres med elevator.

Forholdsregler vedrørende vejrforhold

Undgå at udsætte scooteren for ugunstige vejrforhold såsom ekstrem varme eller kulde, regn eller sne. Hvis du bliver fanget i sådanne forhold under kørsel, skal du søge ly og lade scooteren tørre helt, før du fortsætter eller før du opbevarer eller oplader den.



Overfladetemperaturen kan stige, når den udsættes for ekstern varmekilde (f.eks. sollys).

Batteribeskyttelse



Beskyt altid batteriet mod frost. Oplad IKKE batterier, der har været udsat for frost. Hvis batteriet er beskadiget eller revnet, skal du straks kontakte importørens kundeservice og undlade at bruge batteriet.



Du må IKKE ændre nogen kredsløbsforbindelser. Enhver form for selvreparation er forbudt og kan medføre skader, der ikke er dækket af garantien.

Elektromagnetiske forstyrrelser (EMI) fra motordrevne køretøjer



Da elektromagnetisk (EM) energi stiger hurtigt, jo tættere man kommer på en sendeantenne, er EM-felter genereret af håndholdte radiobølgekilder (transceivere) særlig bekymrende. Når man bruger sådanne enheder, er det muligt at udsætte det motordrevne køretøjs styresystem for høje niveauer af EM-energi. Dette kan påvirke køretøjets bevægelse og bremsning.

Derfor gives nedenstående advarsler for at forhindre mulig interferens med det motordrevne køretøjs styresystem:

1. **Brug ikke håndholdte transceivere** (sendere-modtagere), såsom CB-radioer, og **tænd ikke personlige kommunikationsenheder**, såsom mobiltelefoner, mens det motordrevne køretøj er tændt.
2. **Vær opmærksom på nærliggende sendere**, såsom radio- eller tv-stationer, og undgå at komme tæt på dem.
3. **Hvis der opstår utilsigtet bevægelse eller bremsen slipper**, skal du slukke det motordrevne køretøj, så snart det er sikkert at gøre det.
4. **Tilføj IKKE tilbehør eller komponenter**, og modifier **ikke** scooteren. Det kan øge dens følsomhed over for EMI, da det ikke er let at vurdere effekten af sådanne ændringer på køretøjets samlede immunitetsniveau.
5. **Rapporter alle tilfælde af utilsigtet bevægelse eller frigørelse af bremsen** til importøren, og bemærk, om der var en kilde til EMI i nærheden.

2. Produktinformation og betjening

A. ELEMENTER I SCOOTEREN

1. Ryglæn
2. Sæde med pude
3. Armlæn
4. Controller (LCD-kontrolpanel)
5. Styremekanisme (håndtag)
6. Højdejustering
7. Lys (lommelygte)
8. Ekstra batteriopbevaring (højre side)
9. Sammenklappeligt håndtag
10. Opladningsport
11. Lithiumbatteri
12. Batterirum (venstre side)
13. Forreste 6" solide hjul
14. Bageste 8" solide hjul



B. PRODUKTKARAKTERISTIKA

- Letvægts, sammenklappelig ramme i aluminium med fastgørelsesrem
- Komfortabel og blød pude
- Solide 8" baghjul og 6" forhjul
- Controller med LCD-skærm
- Sikre og pålidelige elektromagnetiske bremses
- Fuldt lukket, vedligeholdelsesfrit batteri
- Børsteløs motor
- Ekstra rum under fodstøtten til opbevaring af ekstra batteri
- Anti-tip-hjul og opklappelige armlæn
- To driftsformer: elektrisk og manuel
- Sikkerhedsbeskyttelse til batterier

- Håndtags højdejustering

C. TEKNISKE PARAMETRE

1. Produkttype: til indendørs og udendørs brug
2. Maksimal hastighed: ≤ 7 [km/h]
3. Maksimal kapacitet: 120 [kg]
4. Bremselængde på vandret underlag: $\leq 0,8$ [m]
5. Maks. rækkevidde: 16 [km]
6. Batteri: lithium, 24 [V] x 10,4 [Ah]
7. Maks. stigningsvinkel: $\leq 9^\circ$
8. Min. venderadius: 1,3 [m]
9. Kørestolsvægt: 18,20 kg (uden batteri)
10. Batteriets vægt: 1,70 kg
11. Batteriets opladningstid: 6-8 timer

Bemærk! Nogle parametre kan variere afhængigt af brugerens vægt, vejforhold og batteriforbrug.

- Sikkerhedsklassificering: type B
- Indtrængningsbeskyttelsesniveau for motor: IPX4
- Motorens effekt: 270 [W]
- Scooteren må ikke bruges i områder med brandfarlig gas blandet med luft, ilt eller lattergas.

D. MONTERING OG JUSTERING

- **Udfoldning:** Tag scooteren ud af kassen. Placer den på jorden. Tag fat i scooteren ved håndtaget og ryglænet, og fold den ud. Tryk sædet ned, så alle elementerne passer sammen. Løft ryglænet, og fold det ud. Fastgør puden, og monter batteriet i venstre slot i bunden af scooteren (sørg for, at batteriets strømafbryder er tændt).
- **Sammenfoldning:** For at folde kørestolen sammen skal du gentage trinene fra **udfoldning** i omvendt rækkefølge.

Bemærk! Fjern batteriet og sluk det på afbryderen inden transport.


- **Start af motor:** Indsæt bilnøglen i tændingslåsen, og drej den til højre for at tænde scooteren.
- **Justering af håndtag:** Justeringen skal foretages, mens du sidder. Løsn sikkerhedsspændet, vælg den ønskede højde på håndtagene, og lås spændet bagefter.
- **Vipning af armlæn:** Tag fat i armlænet og vipp det op, mens du sætter dig på scooteren.

- **Fjernelse af batteriet:** For at fjerne batteriet skal du placere hånden under scooterens fodstøtte og skubbe batteriet opad.
- **Fastgørelse af taske:** Brug velcrobånd til at fastgøre tasken foran på scooteren.

E. ELEKTRISK OG MANUEL TILSTAND

For at bruge scooteren i elektrisk tilstand skal du flytte motorhåndtaget bagpå nedad. For at bruge den i manuel tilstand skal du flytte håndtaget opad.

Elektrisk tilstand → Manuel tilstand

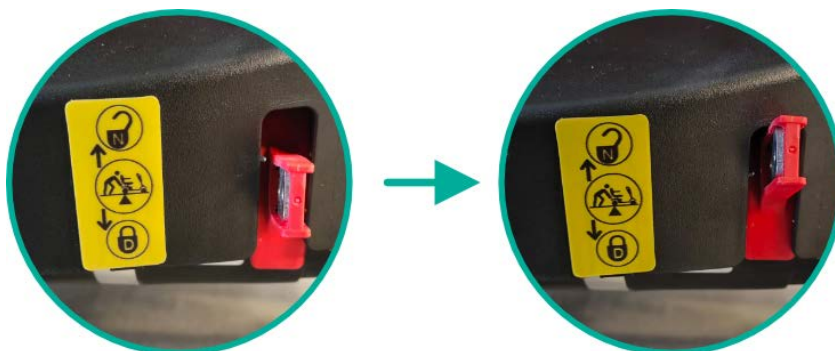

F. OPLADER


- Sættet indeholder en oplader til batteriet.
- Batteriets opladningstid er ca. 6-8 timer.
- Sæt opladeren i opladningsporten, der er placeret under sædet (foran batterirummet) eller på batteriet.

BEMÆRK: Sluk for kontrolpanelet, inden du tilslutter opladeren.

- Tilslut opladeren til strømforsyningen.
- Kontroller forbindelsen.
- Rødt lys indikerer, at batteriet oplades, mens grønt lys indikerer, at det er fuldt opladet/frakoblet. Når opladningen er færdig, slukkes opladeren for at undgå overopladning.
- For at undgå brandfare må du ikke ændre eller afbryde kredsløbet, mens batteriet oplades.
- For at kontrollere det aktuelle batteriniveau på kontrolmodulet skal du først frakoble opladeren.

G. KONTROLPANELETS FUNKTIONER

1. Håndtag
2. Styremekanisme (håndtag)
3. Advarsel/horn
4. Tændingsnøgler
5. Lommelygte til/fra
6. Batteriniveauindikator
7. Aktuel hastighedsindikator
8. Lommelygteikon
9. Hastighedsjusteringsknap
10. Kørt afstand

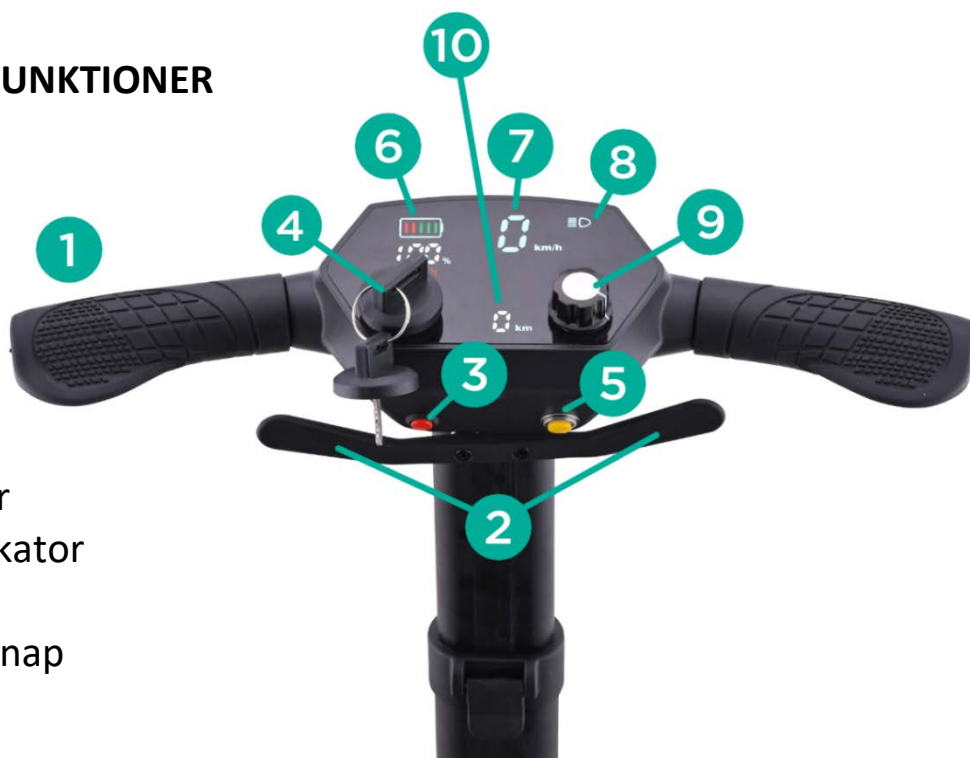

- **Styremekanisme (2) og styr (1)** – bruges til at styre hastigheden (2) og retningen (1). Jo længere styret skubbes væk fra brugeren, jo hurtigere kører løbehjulet. Det mister automatisk hastighed, når styret slippes.



Højre side af håndtaget: Når det skubbes længere væk fra brugeren, kører scooteren fremad. Når det skubbes tættere på, kører scooteren baglæns.

Venstre side af håndtaget: Når det skubbes længere væk fra brugeren, kører scooteren baglæns. Når det skubbes tættere på, kører scooteren fremad.

- **Tændingsnøgle (4)** – sæt nøglen i tændingslåsen og drej til højre for at tænde scooteren. Drej den tilbage til lodret position for at slukke den.
- **Kørselsafstand (10)** – viser den tilbagelagte afstand, når scooteren er tændt. Den nulstilles, når kontrolmodulet slukkes.
- **Hastighedsknap (9)** – drej knappen til højre for at øge hastigheden (op til 7 km/t), drej til venstre for at sænke hastigheden.

H. BRUGSANVISNING

- Sæt dig på scooteren og tænd kontrolpanelet. LCD-panelet lyser op. Styremekanismen skal være i neutral position.
- Vær forsigtig, når du bruger den for første gang. Kontroller hastigheden og retningen omhyggeligt. Den elektromagnetiske bremse frigøres først, når du trykker på styrehåndtagene (elektrisk tilstand). For at øge hastigheden skal du skubbe håndtaget længere væk fra neutral position. For at sænke hastigheden skal du gøre det modsatte.

- For at stoppe scooteren skal du slippe styrehåndtaget.
- Brug den dedikerede knap på kontrolpanelet til at justere scooterens hastighed i henhold til brugerens fysiske tilstand og vejforholdene.
- Scooteren må kun bruges på flade overflader. Kørsel på mudrede eller ujævne overflader kan beskadige styresystemet.

I. TEKNISKE DATA

Produktkode	ULTRA-TIM
Samlet højde	88 cm
Samlet bredde	51 cm
Samlet længde	95 cm
Sædehøjde fra gulvet*	48 cm (51 cm med pude)
Ryglænhøjde**	39 cm
Sædehyndens mål	31 x 38 x 3 cm
Batteriets vægt	1,70 kg
Maksimal kapacitet	120 kg
Scooterens vægt	18,20 kg
Hjul	for: 6" solide bag: 8" massive

* målt fra jorden; ikke scooterens fodstøtte

** målt fra røret under ryglænet

3. Rengøring og vedligeholdelse af komponenter

A. RENGØRING

- Brug kun en fugtig klud og milde rengøringsmidler til rengøring af stellet. For ekstra sikkerhed skal du bruge en ren klud til at tørre overskydende rengøringsmiddel/vand af.
- Brug **IKKE** højtryksrenser eller vandslange på scooteren. Det kan beskadige de elektriske komponenter.
- Scooteren må kun rengøres med vand og godkendte milde rengøringsmidler ved en temperatur på 0 °C eller derover.

B. VEDLIGEHOLDELSE AF BATTERIET:

- 1) Kontroller regelmæssigt det viste batteriniveau. Hvis niveauet er meget lavt, skal du oplade det straks for at undgå et spændingsfald (som kan påvirke batteriets levetid).
- 2) Hvis scooteren ikke skal bruges i længere tid, skal batteriet oplades mindst en gang om måneden.
- 3) Batteriet har en bestemt levetid. Udskift batteriet, hvis det er slidt.
- 4) Batteriet skal holdes rent og væk fra børn. Undgå at forårsage stød eller beskadigelse af batteriet.
- 5) Oplad det regelmæssigt for at forlænge dets levetid.
- 6) Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til lokale miljøbestemmelser.

C. PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE

Alle brugte eller beskadigede scooterdele skal udskiftes (i sådanne tilfælde bedes du kontakte sælgeren).

Kontroller, at scooterens komponenter ikke er løse/beskadigede/kræver service i henhold til fanen nedenfor:

Dele	Kontrolhyppighed
Styr	Hver uge
Hastighedskontrolknap	Hver uge
Styrehåndtag	Hver uge
Kontrolpanel (knapper, LED, knap osv.)	Hver dag
Elektromagnetiske bremses	Hver uge
Kørsel (sving, bakning osv.)	Hver måned
Manglende dele	Efter modtagelse af scooteren eller efter længere tids opbevaring
Skruer, forbindelsesdele, kabler osv.	Mindst en gang om året; anbefales hver måned
Batteri	I tilfælde af batteriudslidning (kontakt sælgerens serviceafdeling) eller hvis batteriet er blevet beskadiget

4. Opbevarings- og transportbetingelser

A. TRANSPORT

- Vær forsigtig under transport. Undgå at kaste, vende eller lægge pres på produktet og dets emballage.
- For at folde scooteren sammen, se afsnittet "Samling og justering".

B. OPBEVARING

Scooteren skal opbevares på et tørt og godt ventileret sted. Dæk scooteren til ved længerevarende opbevaring for at undgå støv.

Undgå: ekstremt høje/lave temperaturer og hurtige temperaturændringer, syrer, baser og ætsende kemikalier.

C. OPBEVARINGSBETINGELSER


Temperatur: -40 [°C] ~ +55 [°C]

Fugtighed: ≤80 %

Lufttryk: 86 ~ 106 kPa

D. FEJLFINDING

I tilfælde af en fejlfunktion vil kontrolmodulet vise en advarsel på skærmen.

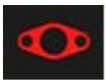Ikonindikator på kontrolmodulet	Årsag	Årsag og løsning
	Bremsesvigt Defekt controller	1. Scooteren er i manuel tilstand. Skift bremsen fra manuel tilstand til elektrisk tilstand. 2. Problemer med controlleren, kontakt importørens serviceafdeling.
	Fejl i controlleren	Løs kabelforbindelse eller problemer med controlleren. Kontakt importørens serviceafdeling.
	Potentiometerfejl	PCB-kort, beskadiget potentiometer eller løse

		kabler. Kontakt importørens serviceafdeling.
	Batteri fejl	1. Batteriet er placeret forkert. Kontroller, om batteriet er i venstre slot (højre slot er kun til opbevaring af batteriet). 2. Batteriet er slidt eller beskadiget. Kontakt importørens kundeservice.
	Forbindelsesfejl	Problem med skærm, PCB-kort eller løst kabel. Kontakt importørens kundeservice.
	Motorfejl	Problem med motor eller løst kabel. Kontakt importørens kundeservice.

E. ANDRE MULIGE PROBLEMER

- 1. Vuggende hjul** – slidt eller beskadiget hjul. Kontakt service.
- 2. Scooteren kan ikke foldes sammen/ud** – låsepinden er beskadiget. Kontakt service.
- 3. Scooteren har brug for mere end 3 meter for at stoppe** – kontakt service.
- 4. Scooteren bevæger sig ikke:**
 - tændingsnøglen er slukket – tænd den,
 - opladeren er stadig tilsluttet scooteren – fjern den,
 - elektrisk tilstand er slukket – skift fra manuel til elektrisk tilstand,
 - andet problem – kontakt serviceafdelingen.
- 5. Lommelygten eller andre lys fungerer ikke** – kontakt serviceafdelingen.
- 6. Når du drejer scooteren med tændingsnøglen, tænder scooteren ikke, eller skærmen tænder ikke** – batteriet er ikke korrekt installeret. Hvis scooteren stadig ikke tænder, skal du kontakte serviceafdelingen.
- 7. Kontrolproblemer med styret eller hjulene; dækkene slides ujævnt på begge sider** – kontakt service.

F. BRUGBARHED

Bortskaf scooteren i overensstemmelse med gældende lokale og nationale lovbestemmelser. For information om korrekt bortskaffelse af emballage, rammekomponenter, plastdele, elektronik, batterier, neopren, silikone og polyurethanmaterialer, kontakt den lokale affaldsmyndighed eller en autoriseret serviceudbyder.

G. GARANTIOPLYSNINGER

- Alle produkter, der distribueres af vores virksomhed, er dækket af en garanti, hvis vilkår er beskrevet i garantibeviset, der findes på vores hjemmeside. Kontakt den forhandler, hvor du har købt produktet. Husk, at købsbeviset (kvittering eller faktura) skal opbevares i forbindelse med garantien. Som en brugervenlig virksomhed leverer vi kun testede produkter – med hensyn til materiale, kvalitet og funktionalitet. Hvis du har spørgsmål vedrørende serviceprocedurer, bedes du kontakte os.
- **Garantien dækker ikke:**
 - **sliddele:** polstring, dæk, armlæn, batteri osv.
 - **skader som følge af:** egenreparationer, ændringer i produktets konstruktion, tab, transport, forkert brug, manglende overholdelse af instruktioner, naturkatastrofer (brand, jordskælv, oversvømmelse).
- Produktkoden er synlig på scooterens stel.



Yongkang Yile Vehicle Co., Ltd.

No. 46 Zerong Road, Dahou Industrial Zone, Tangxian Town,
Yongkang City, Zhejiang Province, China.



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA
Capelle aan des IJssel, The Neatherlands



Timago International Group

Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Poland
T.: +48 33 499 50 00
E.: info@timago.com



01/2026 (I)